

EMBRACE ADVANCE extendable *allungabile*

The Embrace Advance paediatric bed has clean, modern lines and adheres to the highest standards of safety and infection control. Designed for patients of a variety of ages. **Electrically operated backrest movements, Trendelenburg, reverse Trendelenburg positions** and platform height adjustments. The key feature of this bed is the extendable mattress platform.

*Il lettino pediatrico Embrace Advance, dalle linee semplici e moderne, segue i più alti standard di sicurezza e controllo infezioni. Ideato sia per le esigenze dei pazienti piccoli che dei grandi. **Inclinazione elettrica dello schienale, movimenti elettrici di Trendelenburg e contro Trendelenburg e variazione dell'altezza del piano rete.** Caratteristica principale, allungamento del piano rete del lettino.*

Telescopic siderails that extend automatically with the platform. Reduced gaps between the bars for added security.

Sponde telescopiche che si allungano in automatico con l'allungamento del piano rete. Spazi ridotti tra i listelli per una maggiore sicurezza.

Electrically operated bed extender providing an increase in length of 28cm. During extension the platform remains completely flat.

Allungamento lettino con movimentazione elettrica, di 28 cm. Movimento di allungamento piano rete è complanare senza dislivelli tra le sezioni.

Control panel with lockable commands. The control panel is conveniently located for the operator but out of reach of the child.

Pulsantiera con comandi bloccabili. Sede per pulsantiera facilmente raggiungibile dall'operatore e fuori dalla portata del bambino.

Mattress platform height may be adjusted electrically so as to be at the most suitable height for both child and operator.

*L'altezza del piano rete può essere variata con **sistema di sollevamento elettrico su colonne telescopiche** per raggiungere la posizione più idonea per bambino e operatore.*

Washable 150 mm wheels with centralised braking system.

Ruote diametro 150 mm lavabili, con freno centralizzato.

Standard removable headboard. Removable footboard available.

Spalle rimovibili di serie al lato testa e possibilità di rimozione anche lato piedi.

Plastic support struts with simple, clean lines for easy cleaning and disinfection.

Montanti in plastica con forme semplici e superfici lisce per permettere una facile pulizia e disinfezione.

Back and pelvis sections with removable ABS cover, leg section made from HPL panels. All surfaces are easy to clean and disinfect. The platform is perforated to allow effective aeration of the mattress.

Schienale e bacino con cover in ABS rimovibili e sezione gambale in pannelli di HPL. Superfici facili da pulire e sanificare. Piano rete dotato di forature per aerazione del materasso.

Epoxy coated steel side rails with dampened lowering motion.

Sponde in acciaio verniciato a discesa rallentata.


Standard features (other features may be customised)

Caratteristiche standard (gli altri elementi sono configurabili)



9LP0035

STANDARD FEATURES CARATTERISTICHE STANDARD

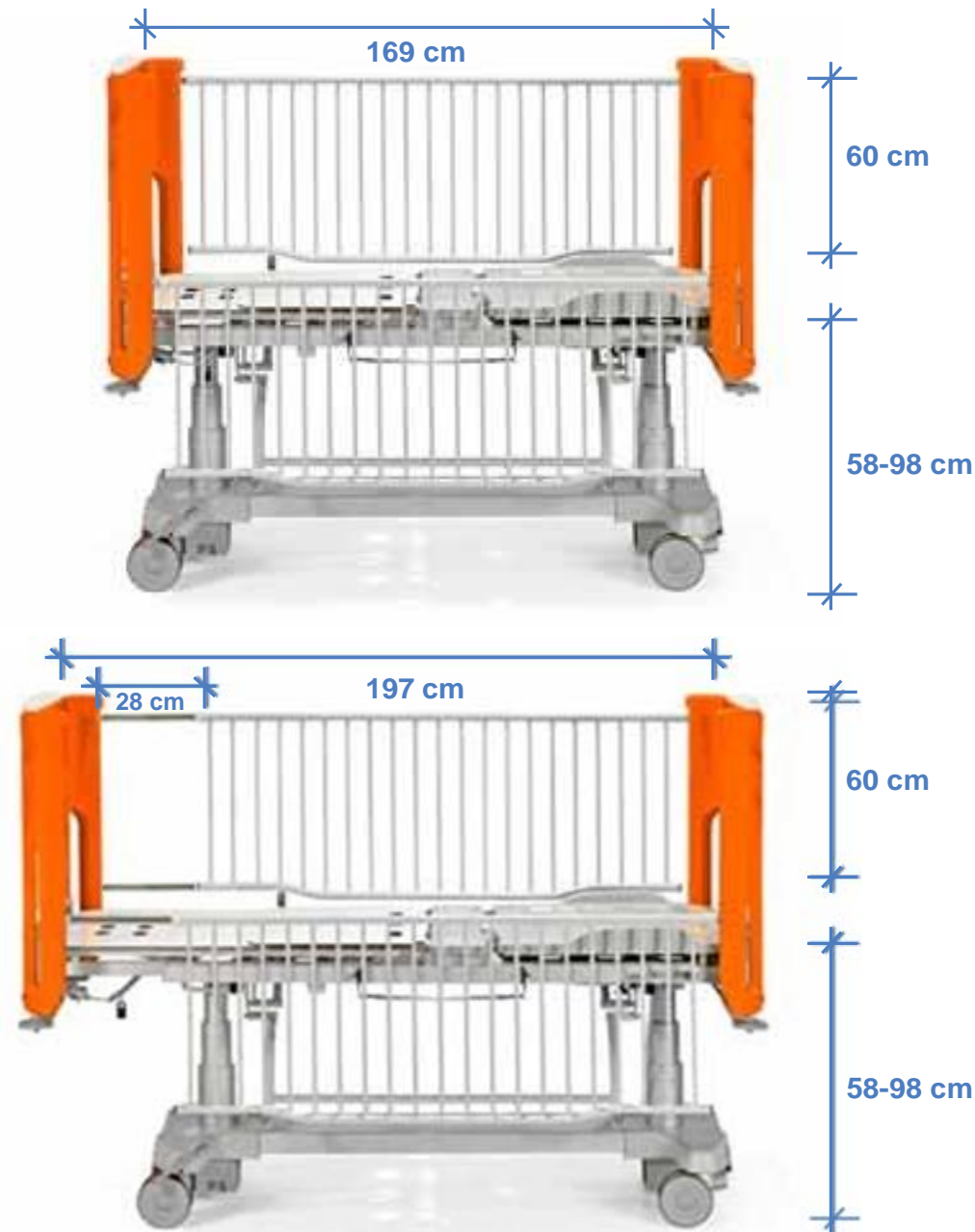

The Embrace Advance bed **extends electrically** to adapt to children of all sizes. The siderails are telescopic and lengthen automatically with the platform for maximum side protection and increased patient safety.
Siderail height platform: 60 cm.

The platform height variation is adjustable by means of electrically operated **telescopic columns**. **The platform can be raised from a minimum of 58 cm** to a maximum of 98 cm, a range of 40 cm.

Il lettino Embrace Advance si allunga con un movimento elettrico adattandosi all'altezza del paziente.

Le sponde sono telescopiche e si allungano in automatico con l'allungamento del piano rete per una protezione laterale totale e una maggiore sicurezza del paziente. L'altezza sponde dal piano rete di 60 cm.

La variazione dell'altezza del piano rete è regolato da un sistema di sollevamento elettrico su colonne telescopiche. Il piano rete può essere sollevato da un'altezza minima di 58 cm fino ad un'altezza di 98 cm, una variazione di 40 cm.



Electrically operated backrest **adjustable from 0° to 75°**. Safety cover under the backrest to protect the child from potential harm or from falls. **Manually operated leg section adjustable to a range of positions**. All surfaces are extremely quick and easy to clean and disinfect.



Schienale con movimento elettrico, regolabile da 0° a 75°. Sotto lo schienale una copertura di sicurezza per proteggere il paziente pediatrico da ferite o cadute. Sezione gambale regolabile manualmente in più posizioni. Tutte le superfici sono estremamente facili e veloci da pulire e sanificare.



The **Trendelenburg and reverse Trendelenburg** movements provide flexibility in positioning and patient care.



Movimentazione di Trendelenburg e contro Trendelenburg offrono una grande flessibilità sia nel posizionamento che nella cura del paziente.

STANDARD FEATURES CARATTERISTICHE STANDARD



The head/foot panels are removed via a **lock/release system** which is easy to use and placed well out of the child's reach.
La spalla viene rimossa con un sistema di blocco e sblocco molto semplice per gli operatori, ed è inoltre fuori dalla portata del bambino.

The **CPR lever** is located at the head end. The lever enables rapid manual lowering of the back section and can be reached easily by the operator from either side of the bed.
A lato testa si trova la leva CPR per l'abbassamento rapido e manuale della sezione schienale. Facilmente raggiungibile dall'operatore da entrambi i lati del lettino.



Siderail adjustments are **gas spring assisted** to provide optimum stability and safety. The siderail release mechanism is located under the platform out of the child's reach. The gaps between the siderails and head/foot panels have been reduced for **added safety**.

Il movimento delle sponde è assistito da molle a gas e garantisce un'elevata stabilità e sicurezza. Il meccanismo di sblocco sponde è posizionato al di sotto il piano rete non raggiungibile dal bambino. Gli spazi tra le spalle e le sponde sono stati ridotti per una maggiore sicurezza.



The control panel is **conveniently located** for the operator but well out of the child's reach.
Sede per pulsantiera facilmente raggiungibile dall'operatore e fuori dalla portata del bambino.



Flip up HPL leg section for easy cleaning. All the sections of the platform can be cleaned and disinfected quickly and effectively.
Sezione gambale in HPL ribaltabili per facilitare la pulizia. Tutte le superfici del piano rete sono estremamente facili e veloci da pulire e sanificare.

CUSTOMISABLE FEATURES CARATTERISTICHE CONFIGURABILI



150 mm antistatic, **washable twin wheels** with centralised braking system.
Ruote gemellari, diametro 150 mm, antistatiche, lavabili, con freno centralizzato.



125 mm **washable wheels** with centralised braking system.
Ruote singole, diametro 125 mm, lavabili, con freno centralizzato.



Removable head panel, fixed foot panel.
Spalla lato testa rimovibile e lato piedi fissa.



Removable head/foot panels.
Spalle a lato testa e lato piedi rimovibili.